

Kit de prueba para detectar la COVID-19 en el hogar

¡Hágase la prueba para ayudar a proteger a todos los neoyorquinos! NYC Health + Hospitals le ofrece para su familia un kit de prueba para detectar la COVID-19 en el hogar.

Cualquier persona que obtenga un resultado positivo en la prueba para detectar la COVID-19 o que haya estado en contacto con alguien con COVID-19, debe continuar aislándose de manera segura de las demás personas hasta que su supervisor indique que puede dejar de hacerlo. Si ya se hizo la prueba para detectar la COVID-19, comparta con familiares y amigos este kit de prueba para detectar la COVID-19 en hogar.



El kit de prueba para detectar la COVID-19 en el hogar contiene lo siguiente:

- Hisopo nasal
- Tubo de plástico, también conocido como “tubo con solución estabilizante”
- Tarjeta de instrucciones con un código de regalo y un código de activación
- Bolsa de plástico, también conocida como “bolsa de muestras”
- Caja para envío
- Pegatina de sellado
- Bolsa para envío de FedEx

Lea las instrucciones que figuran en la caja para usar el kit, envíe la muestra y obtenga los resultados.

Recordatorio para el envío:

Recuerde enviar la muestra el **mismo día** en que registre el kit y realice la prueba. **No envíe la prueba después de la última recolección del día o durante los fines de semana. También le recomendamos que no envíe pruebas los viernes.**

Puede pedirle a un ser querido que entregue el kit por usted o programar su recolección a domicilio.

Entrega: Consulte los horarios en [fedex.com/dropbox](https://www.fedex.com/dropbox) para ver cuándo es la última recolección del día de Federal Express. Puede enviar la prueba desde cualquiera de las ubicaciones donde haya un buzón de FedEx Express. Recomendamos especialmente las ubicaciones de FedEx Ship Center (Centro de Envío FedEx).

Recolección a domicilio: Para programar una recolección a domicilio, llame al **1-800-463-3339** (**1-800-Go FedEx**). Diga “Schedule a Pickup” (Programar una recolección) o presione “1”. Cuando se le solicite un número de cuenta, proporcione el número de seguimiento de devolución que figura en su bolsa para envío de FedEx.



Please scan for English

Ju lutemi skanoni për shqip

يُرجى تصوير الرمز للغة العربية

অনুগ্রহ করে বাংলার জন্য স্ক্যান করুন

Veillez scanner pour la version en français

Tanpri eskane pou Kreyòl Ayisyen

कृपया हिंदी के लिए स्कैन करें

한국어로 스캔해 주십시오

Proszę sprawdzić wersję polską

Пожалуйста, сканируйте для русского языка

请扫描以获取简体中文版本

Escanee para español

請掃描以取得繁體中文版本

براہ مہربانی اردو کے لیے سکین کریں


[Vea las instrucciones en el reverso >](#)

NYC
HEALTH+
HOSPITALS

Test & Trace
Corps

Instrucciones

- Lea las instrucciones que figuran en la tarjeta del kit.
- Antes de comenzar, registre el kit en línea en picturegenetics.com/covid19/group. Haga clic en **“I have a kit already” (Ya tengo un kit)**.
- Ingrese el **código de regalo** que se encuentra dentro del kit y el **código de activación** que se encuentra en la portada de su encarte de instrucciones, y haga clic en **“Confirm Registration” (Confirmar registro)**.
- Si se le solicita, seleccione que recibió este kit como parte del Kit para Cuidarse (NYC Care Package).
- Lávese las manos antes y después de realizar la prueba.
- No se limpie la nariz antes de realizar la prueba. Puede sonarse la nariz con un pañuelo de papel que no esté perfumado.
- Abra el **tubo de plástico** y colóquelo sobre una superficie plana para colocar la muestra.
- A continuación, abra el **hisopo nasal**. No deje que toque nada antes o después de introducirlo en las fosas nasales.
- Introduzca suavemente el **hisopo nasal** en la fosa nasal, a una profundidad de aproximadamente una pulgada, hasta que toque la parte superior de la cavidad nasal. Frote el hisopo en círculos 4 veces. No debe sentir molestias. Retire el hisopo lentamente.
- Repita este paso en la otra fosa nasal con el mismo hisopo.
- Coloque el **hisopo nasal** en el **tubo de plástico** con el hisopo hacia abajo (el lado que se coloca dentro de la nariz).
- Rompa el **hisopo nasal** por la línea de puntos; debería partirse fácilmente por la mitad.
- Asegúrese de que el **hisopo nasal** esté en el centro del tubo. Luego, cierre bien el **tubo de plástico** y verifique que no tenga fugas. Tenga cuidado de no ajustar demasiado la tapa.
- Coloque el **tubo de plástico** con el **hisopo nasal** dentro de la **bolsa de plástico**.
- Coloque la bolsa de plástico en la **caja para envío** y ciérrela con la **pegatina de sellado**.
- Coloque la **caja para envío** en la **bolsa para envío de FedEx**. Siga las instrucciones de envío del kit.
- Conserve la **tarjeta de instrucciones** para sus registros.

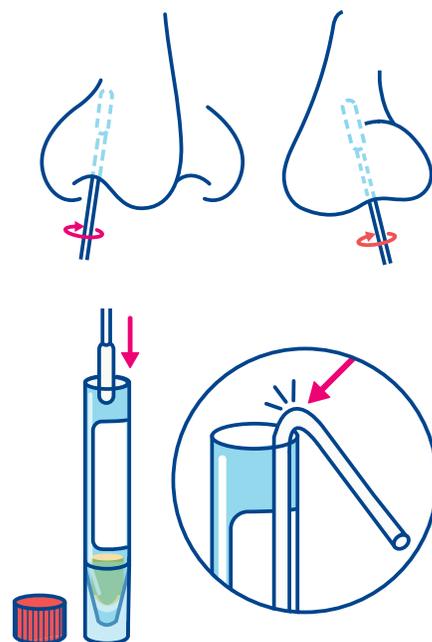

Recuerde lo siguiente:

- Envíe la prueba el mismo día en que registró el kit y realizó la prueba. Debe enviar la prueba en un plazo de 24 horas. No la envíe después de la última recolección del día o durante los fines de semana. También le recomendamos que no envíe pruebas los viernes.
- Obtendrá los resultados dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la muestra por parte del laboratorio. Los resultados estarán disponibles a través de su cuenta del portal de Picture Genetics.

Debe verificar su cuenta de Picture Genetics por correo electrónico de la siguiente manera:

Busque en su bandeja de entrada un correo electrónico de verificación de [donotreply@picturegenetics.com].

Puede encontrar estas instrucciones y un video de demostración en

picturegenetics.com/nasalswab

Para obtener ayuda, puede comunicarse con Picture Genetics a través de los medios que se indican a continuación.

Correo electrónico: hello@picturegenetics.com

Chat en vivo: a través de la página PictureGenetics.com

Teléfono: **626-434-3596**, de lunes a viernes, de 12 p. m. a 7 p. m., hora del este

iGracias por ayudar a mantener sana a la ciudad de Nueva York! Que esté bien.